

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	-----------------	------	-------------

中文品名：“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器  
英文品名：“ResMed” AirCurve 10 VAuto Positive Airway Pressure Device  
製造批號：  
製造日期：  
許可字號：衛部醫器輸字第 032558 號  
製造廠名稱：Resmed Limited  
製造廠地址：1 Elizabeth Macarthur Drive BELLA VISTA, NSW, 2153 Australia  
藥商名稱：台灣瑞思邁股份有限公司  
藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載

市售醫療器材得僅放置經審查核定之中文仿單。但  
如市售醫療器材同時放置中、外文仿單者外文仿單  
內容須與核定本之中文仿單內容相符。

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	-----------------	------	-------------



### HUMIDAIR CLEANABLE

## 37300

REF



CATALOG NUMBER 6 19498 36850 1

MADE IN AUSTRALIA

1754823

LOT



BATCH CODE (10)1754823



(01)00619498368501  
(11)140825

MANUFACTURER: RESMED LTD  
1 ELIZABETH MACARTHUR DR.  
BELLA VISTA NSW 2153 AUS.  
TEL: +61 (2) 8884 1000  
EMAIL: reception@resmed.com.au  
2014-08-25

DISTRIBUTED BY: RESMED CORP  
9001 SPECTRUM CENTER BLVD  
SAN DIEGO CA 92123 USA

DISTRIBUTED BY: RESMED (UK) LTD **EC/REP** Rx Only  
96 JUBILEE AVE MILTON PARK  
ABINGDON OXON OX14 4RW UK

SEE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) FOR OTHER RESMED LOCATIONS WORLD-WIDE. FOR PATENT INFORMATION SEE [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip)

  
FRAGILE  
HANDLE  
WITH CARE

  
KEEP DRY

  
HUMIDITY  
LIMITATION

  
TEMPERATURE  
LIMITATION

  
ATMOSPHERIC  
PRESSURE  
LIMITATION

---

### HUMIDAIR STANDARD TUB

## 37299

REF



CATALOG NUMBER 6 19498 36850 1

MADE IN AUSTRALIA

1754421

LOT



BATCH CODE (10)1754823



(01)00619498368501  
(11)140825

MANUFACTURER: RESMED LTD  
1 ELIZABETH MACARTHUR DR.  
BELLA VISTA NSW 2153 AUS.  
TEL: +61 (2) 8884 1000  
EMAIL: reception@resmed.com.au  
2014-08-25

DISTRIBUTED BY: RESMED CORP  
9001 SPECTRUM CENTER BLVD  
SAN DIEGO CA 92123 USA

DISTRIBUTED BY: RESMED (UK) LTD **EC/REP** Rx Only  
96 JUBILEE AVE MILTON PARK  
ABINGDON OXON OX14 4RW UK

SEE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) FOR OTHER RESMED LOCATIONS WORLD-WIDE. FOR PATENT INFORMATION SEE [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip)

  
FRAGILE  
HANDLE  
WITH CARE

  
KEEP DRY

  
HUMIDITY  
LIMITATION





  
TEMPERATURE  
LIMITATION

  
ATMOSPHERIC  
PRESSURE  
LIMITATION

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	-----------------	------	-------------

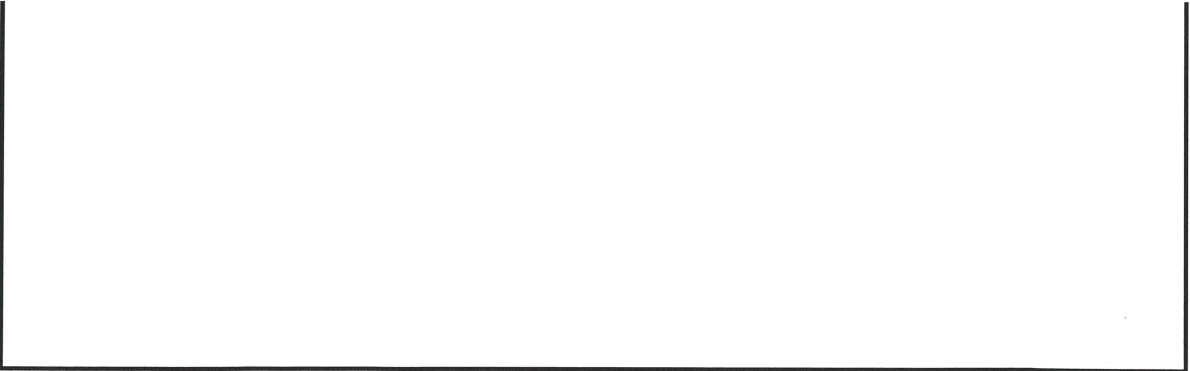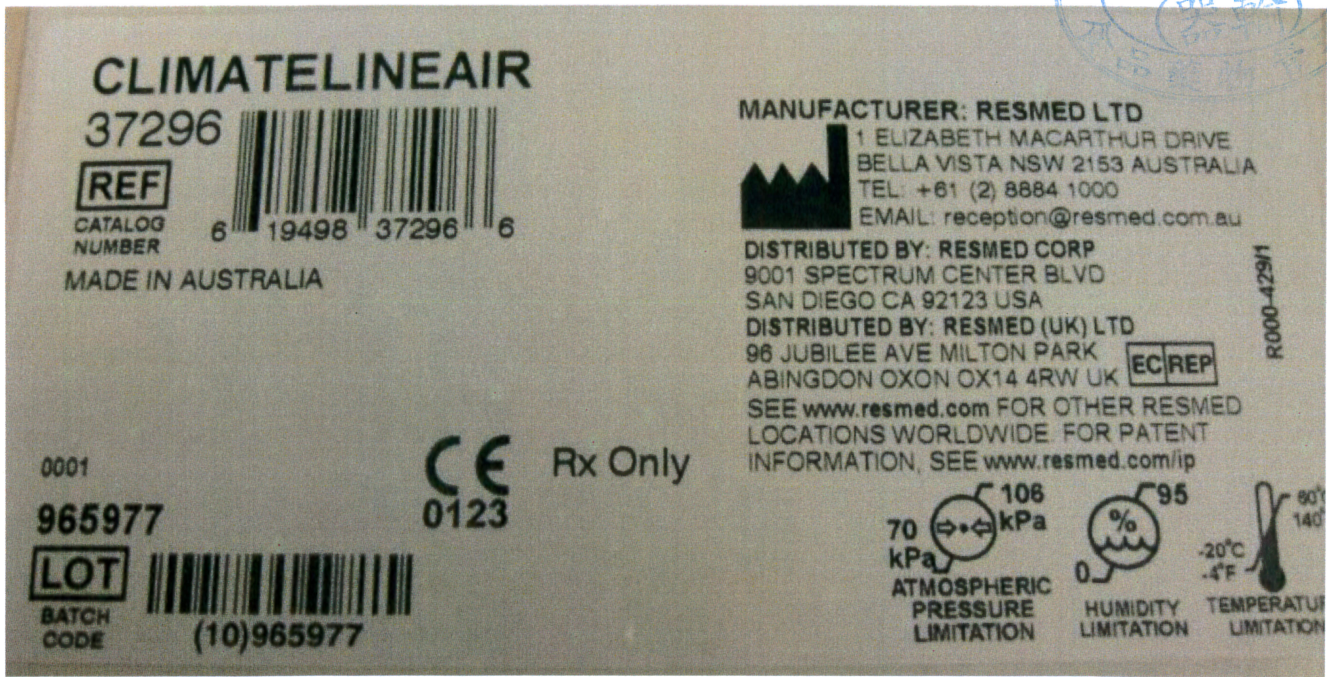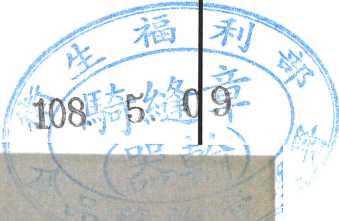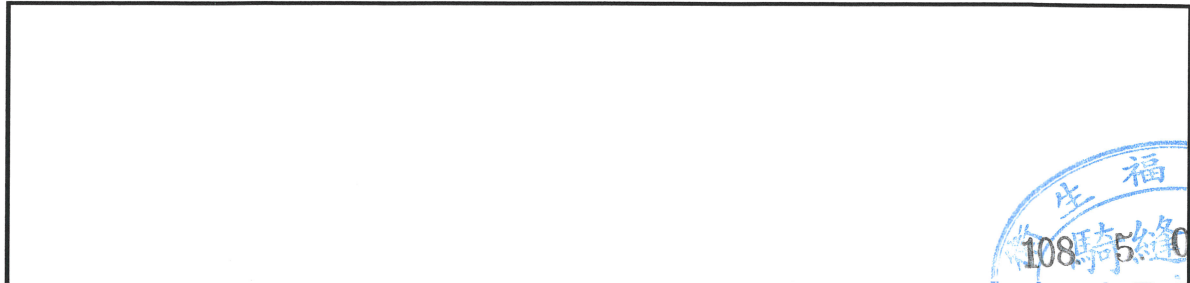

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正 壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	---------------------	------	-------------

**ResMed**  
**SLIMLINE TUBING**

**REF 36810**  
CATALOG NUMBER

**754823**  
LOT

**(10)754823**  
BATCH CODE

0012

MADE IN USA



ENG SlimLine air tubing is designed only for use with the products listed below:  
 DEU Der SlimLine Atemschlauch ist nur für die Verwendung mit den nachstehend aufgeführten Produkten konzipiert:  
 FRA Le circuit respiratoire SlimLine est prévu exclusivement pour une utilisation avec les produits répertoriés ci-dessous:  
 ITA Il circuito respiratorio SlimLine è progettato per l'uso esclusivo con i prodotti elencati di seguito:  
 SPA El tubo de aire SlimLine está diseñado solo para utilizarse con los productos indicados a continuación:  
 POR A tubagem de ar SlimLine foi desenhada para utilização exclusiva com os produtos listados em baixo:  
 NLD De SlimLine-luchtslang is alleen bestemd voor gebruik in combinatie met de onderstaande producten:  
 SWE SlimLine luftslang är endast utformad för användning med de produkter som anges nedan:  
 DAN SlimLine luftslinger er kun beregnet til anvendelse med de nedenfor anførte produkter:  
 NOR SlimLine luftslinge er utformet bare for bruk med produktene som er oppgitt nedenfor:  
 FIN SlimLine-ilmaletku on suunniteltu käytettäväksi alla mainittujen tuotteiden kanssa:

简体中文 SlimLine 空气管线仅设计与下列产品配套使用  
 繁體中文 SlimLine 呼吸管路僅設計與下列產品配套使用

S9™	VPAP™ Tx	Lumix™ Tx
AirSense™ 10	AirCurve™ 10	
Stellar™	Astral™	



**MANUFACTURER:** RESMED LTD  
 1 ELIZABETH MACARTHUR DRIVE,  
 BELLA VISTA NSW 2153 AUSTRALIA  
 TEL: +61 (2) 8884 1000  
 EMAIL: reception@resmed.com.au

**DISTRIBUTED BY:** RESMED CORP  
 9001 SPECTRUM CENTER BLVD,  
 SAN DIEGO, CA 92123 USA

**DISTRIBUTED BY:** RESMED (UK) LTD  
 96 JUBILEE AVE, MILTON PARK, ECREP  
 ABINGDON, OXON, OX14 4RW UK


SEE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) FOR OTHER RESMED LOCATIONS WORLDWIDE.  
 FOR PATENT INFORMATION, SEE [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip)

R360-375/5

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	-----------------	------	-------------

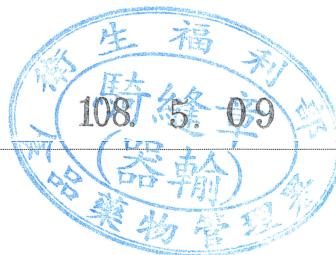

**CLIMATELINEAIR OXY**  
**REF 37357**  
 MADE IN AUSTRALIA

 6 19498 00760 8

 **RESMED LTD**  
 1 ELIZABETH MACARTHUR DR.  
 BELLA VISTA NSW 2153 AUS.

**EC REP RESMED SAS**  
 PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON  
 292 ALLÉE JACQUES MONOD  
 69791 SAINT PRIEST CEDEX FRA.

**LOT (10)1754823**

 R001-4785/4  
 0001

**CE 0123**  
**Rx Only**

 (01)00619498007608  
 (10)1754823



 95%  
 -20C / -4F to 60C / 140F  
 70 kPa to 106 kPa


SEE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) FOR OTHER RESMED LOCATIONS WORLD-WIDE. FOR PATENT INFORMATION SEE [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). SEE SYMBOLS GLOSSARY AT [www.resmed.com/symbols](http://www.resmed.com/symbols)

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## 醫療器材仿單標籤粘貼表


產品中文名稱	“瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器	申請廠商	台灣瑞思邁股份有限公司
--------	-----------------	------	-------------


**GREY TUBING - CUFFED.**



**14948**


MADE IN AUSTRALIA



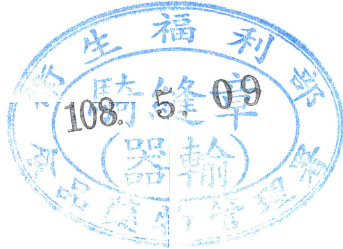

R001-348/4 0001


**LOT** (10)1349664





**RESMED LTD**  
1 ELIZABETH MACARTHUR DR.  
BELLA VISTA NSW 2153 AUS.


**EC REP RESMED SAS**  
PARC TECHNOLOGIQUE DE LYON  
292 ALLÉE JACQUES MONOD  
69791 SAINT PRIEST CEDEX FRA.

SEE [www.resmed.com](http://www.resmed.com) FOR OTHER RESMED LOCATIONS WORLD-WIDE. FOR PATENT INFORMATION SEE [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip) SEE SYMBOLS GLOSSARY AT [www.resmed.com/symbols](http://www.resmed.com/symbols)



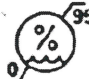





(01)00619498149483  
(10)1349664

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號(規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核

## “瑞思邁”艾克舒氣道正壓呼吸器

### “ResMed” AirCurve 10 VAuto Positive Airway Pressure Device

衛部醫器輸字第 032558 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

型號：AirCurve 10 VAuto

#### ■ 產品用途

本產品適用於治療阻塞型睡眠呼吸中止症(OSA)，CPAP 模式不得對低於 30kg 的患者使用，S 模式不得對低於 13kg 的患者使用。適合居家和醫院使用。

潮濕器適用於患者在家中單人使用以及在醫院/醫療機構中重複使用。

#### ■ 禁忌症

患有下列症狀的患者請勿使用呼吸道正壓通氣療法：

- 嚴重肺大泡性疾病
- 氣胸或氣縱膈
- 病理性低血壓，尤其是如果伴有血管內血容量耗竭
- 脫水
- 腦脊髓液外漏、最近接受過開顱手術或外傷

#### ■ 不良反應

患者應向主治醫生通報異常胸痛、嚴重頭痛或呼吸越來越困難的情況。出現急性上呼吸道感染時，可能需要暫時中止治療。

以此裝置實施治療時，可能會出現以下不良反應：

- 口鼻或喉嚨乾燥
- 流鼻血
- 腹脹
- 耳部或鼻竇不適
- 眼部刺激
- 皮膚疹

#### ■ 警告及注意事項

- 確保您已排好呼吸管路，不會在頭部或頸部周圍扭結。

醫  
藥  
監  
管  
章  
程  
09  
分  
管

- 確保電源線和插頭處於良好狀態，且設備無任何損壞。
- 確保電源線遠離熱表面。
- 如果您注意到裝置出現任何無法解釋的性能改變、發出不尋常的聲音、裝置或供電裝置掉落或操作不當、機殼破裂，請停止使用並聯絡您的醫材供應者或 ResMed 服務中心。
- 請勿打開或修改裝置。裝置內沒有可由使用者維修的部件。應僅限於由授權的 ResMed 維修商進行修理和維修。
- 小心觸電。不得將裝置、供電裝置或電源線浸泡在水中。如果有液體濺入裝置內或灑在裝置上，請拔除裝置的電源，讓零件晾乾。在清潔之前，務必拔除裝置的電源；重新將裝置插好電源前，須確保所有零件已經乾燥。
- 吸菸時或者處於明火環境中，不得使用補充性供氧。
- 在開啟供氧源前，務必確保已開啟裝置且已產生氣流。裝置關閉前務必關閉供氧源，以免未使用的氧氣滯留在裝置機殼內，造成火災的風險。
- 請勿在裝置運行中執行任何維護任務。
- 本裝置不得在其他設備附近使用，或與其他設備疊放。如果必須在其他設備附近或與其他設備疊放使用，應觀察本裝置，確認它能夠在要使用的配置下正常工作。
- 不建議使用本裝置指定配件以外的其他配件。這些配件可能會導致本裝置的排放增加或抗干擾性下降。
- 定期檢查細菌過濾器是否有水分或其他污染物，特別是在霧化或加濕過程中，否則可能會導致呼吸系統阻力增加。
- 本裝置僅限搭配使用 ResMed 零件及配件。非 ResMed 零件可能會降低治療的效果和/或損壞裝置。
- 本裝置僅限搭配使用 ResMed 或主治醫生建議的通氣面罩。在裝置未送出空氣時配戴面罩可能會導致再次吸入呼出的空氣。確保面罩排氣孔通暢無阻，使新鮮空氣流入面罩。
- 放置裝置時要小心，不要放置在會使其受到碰撞或使人絆到電源線的地方。
- 裝置正在運行時，如果阻塞呼吸管路和/或空氣輸入口，可能會導致裝置過熱。
- 保持裝置周圍區域乾燥，並清潔和清除可能阻塞空氣輸入口或覆蓋供電裝置的任何物體（例如衣服或寢具）。
- 不得將裝置側放，因為可能會造成裝置進水。
- 不正確的系統設定可能造成不正確的面罩壓力讀數。請確保系統設定正確。
- 不得使用漂白劑、含氯、酒精或芳香烴類溶液，保濕或抗菌肥皂或含香味精油來清潔裝置、潮濕器或呼吸管路。這些溶液可能會造成潮濕器損壞或影響其性能和縮短產品壽命。




- 若您使用潮濕器，務必將裝置放在低於患者頭部的水平表面，以免面罩和呼吸管路積水。
- 在拿取前先讓潮濕器冷卻 10 分鐘，讓水變冷，並確保潮濕器不會太燙手。
- 運輸裝置之前，請確保潮濕器已排空。
- 其他相關警告及注意事項，請詳閱原廠產品使用手冊。

備註：若無負責患者安全的人員充分監督下，本產品不應由身心、感官狀態不佳的人員(包含兒童)操作。

## ■ 使用方法

### 安裝

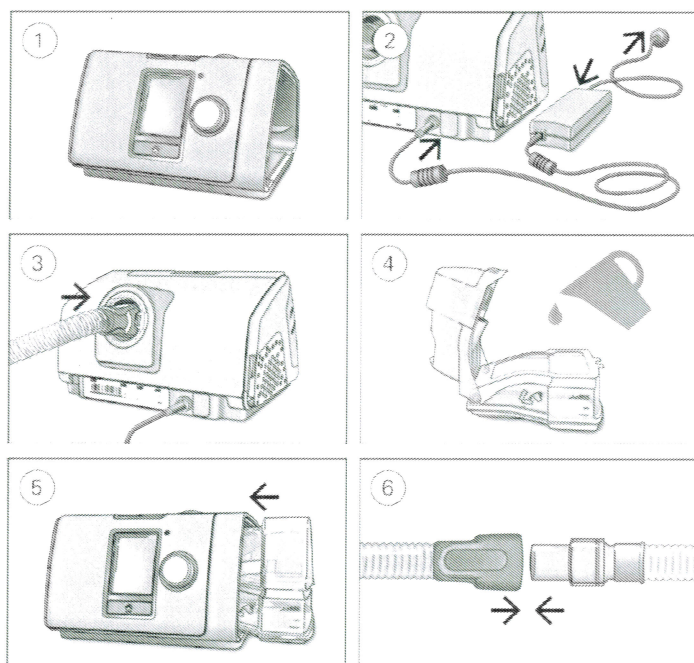


**警告：**不得把潮濕器水箱裝的太滿，以防止水進入設備和呼吸管路內。

1. 把裝置放置在穩定表面上。
2. 連接裝置背面的電源。電源線的一頭連接在裝置上，另一頭連接在插座上。
3. 把呼吸管路牢固連接在裝置背面的出氣口。
4. 打開潮濕器，注入蒸餾水，不要超過最高水位線。不要注入熱水。
5. 關閉潮濕器，並將此從裝置側面放入。
6. 把呼吸管路的另一端牢固的連接在面罩上面。請參考面罩的使用說明書。

### 開始治療

1. 戴上面罩。
  2. 按下 Start/Stop 或是當 SmartStart 已經啟動，直接正常呼吸即可。
- 當出現 Sleep Report 畫面時，說明治療已經開始。

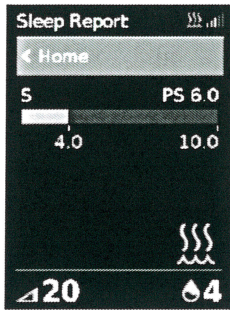


綠色壓力柱顯示吸氣和呼氣壓力。  
當您吸氣呼氣時，綠柱會變化。

短時間後螢幕變為黑色。可按下 Home 鍵或旋鈕使螢幕變亮。如果治療期間斷電的話，等電源重新連上後，裝置將會自動重新治療。本裝置有燈光感測器，可以根據室內的光線調節顯示螢幕的亮度。

### 停止治療

1. 脫下面罩。
2. 按下 Start/Stop 或者是已經啟動 SmartStart，則幾秒鐘後治療會自動停止。

Sleep Report 會顯示治療情況的摘要。

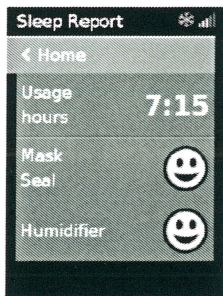

Usage hours — 顯示上次接受治療的時間。

Mask Seal — 顯示密封情況：

- 😊 密封情況良好。
- 😞 需要調節，請參考配戴面罩一節。

Humidifier — 顯示潮濕器是否正常運作：

- 😊 潮濕器正常運作。
- 😞 潮濕器可能出現故障，請聯繫您的供應商。

若經由您的供應商設置，您還會看到：

Events per hour — 顯示每小時呼吸中止和低通氣次數。

More Info — 往下滑動查看更多詳細的使用數據。

### 節能模式

本產品記錄了您的治療數據。為了把您的數據傳遞給您的治療醫生，不要拔除電源。然而，您可以把您的裝置設置在節能模式上節能。

進入節能模式：

- 按住 Start/Stop 3 秒不放。螢幕變成黑色。

退出節能模式：


- 按一下 Start/Stop。出現主頁。

福  
縫  
輪  
物

福  
物

## 我的選項


產品供應商會根據您的需要設置裝置，但是您也可以自己做細微的調整。

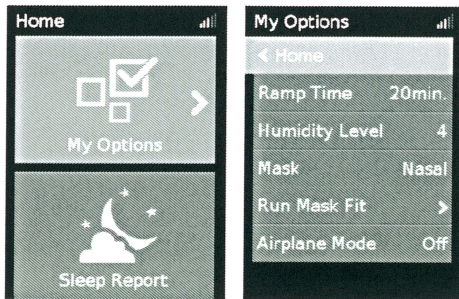

選擇 My Options，查看您當前的設置。

## 緩衝時間

為了在治療初期更加舒適，緩衝時間是從開始低壓力增加到治療壓力的時間。您可以把緩衝時間設置為 off 或 5 到 45 分鐘。

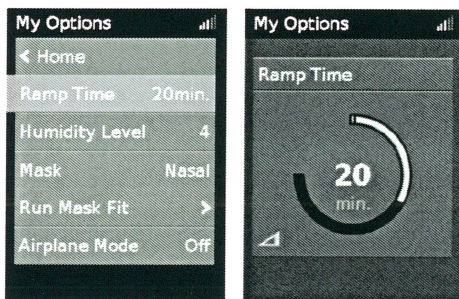

調整緩衝時間：

1. 在 MyOptions 選項，選擇 Ramp Time 後按下。
2. 調節緩衝時間，並按下保存。

## 濕度等級

潮濕器可以使空氣濕潤，使治療更加舒適。若您感覺口鼻乾燥，請增加濕度。若您感覺面罩內濕潤，請降低濕度。

您可以把濕度設置為 off 或者從 1 到 8，1 是最低濕度，8 是最高濕度。



調整濕度：

1. 在 MyOptions 選項，選擇 Humidity Level 後按下。
2. 調節濕度，並按下保存。

若您還是覺得口鼻乾燥或者面罩內濕潤，請考慮 ClimateLineAir 加熱呼吸管路。ClimateLineAir 與 Climate 控制一起使用可以使治療更為舒適。

## 配戴面罩

可以幫您評估並確認面罩周圍是否漏氣。



檢查配戴面罩：

3. 按照面罩使用說明書配戴面罩。
4. 在 MyOptions 選項，選擇 Run Mask Fit 並按下。裝置開始充氣。
5. 調節面罩、面罩軟墊和頭帶，直到顯示 Good 的結果。

按下旋鈕或 Start/Stop 鍵停止配戴面罩功能。如果沒辦法得到好的密封性，請聯繫您的醫材供應者。

### 更多選項

您的醫材供應者可能給您提供更多選項。

Leak Alert*	當啟動此功能，若面罩漏氣過多或在治療期間取下面罩，裝置會發出蜂鳴聲。
SmartStart*	當啟動此功能，當戴上面罩呼吸時，自動啟動治療。當脫下面罩後幾秒鐘，自動停止治療。

\* 被醫材供應者啟動時。

### ■ 產品清潔

您應按照敘述，每周清潔裝置。有關清潔面罩的詳細說明，請參閱您的面罩使用者指南。

1. 使用溫和的清潔劑及溫水清洗潮濕器和呼吸管路。
2. 徹底沖淨潮濕器和呼吸管路，靜待晾乾，避免陽光直射和/或高溫。
3. 使用濕布擦拭裝置外部。

備註：

- 潮濕器可在洗碗機中以輕柔洗程清洗(僅限置放於頂層)。清洗的溫度不應高於 65°C。
- 請勿在洗衣機或洗碗機清洗呼吸管路。
- 每天清空潮濕器並使用拋棄式擦拭巾擦拭。靜待晾乾，避免陽光直射和/或高溫。

### ■ 產品規格

#### 90W 供電裝置

交流電輸入範圍：

100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, ClassII  
115V, 400Hz 1.5A, ClassII(適合飛機上使用)

直流電輸出：	24V $\overline{\overline{=}}$ 3.75A
典型功耗：	53W (57VA)
峰值功耗：	104W (108VA)

---

#### 環境條件

操作溫度：	+5°C – +35°C
	備註：此治療裝置所產生供患者呼吸的氣流可能高過室溫。在極端的環境溫度條件下(40°C)，裝置仍能安全使用。
操作濕度：	10 – 95% 相對溼度，非冷凝
操作海拔高度：	海平面至 2,591 m；氣壓範圍 1013 hPa – 738 hPa
存放和運輸溫度：	-20°C – +60°C
存放和運輸濕度：	5 – 95% 相對溼度，非冷凝

---

#### 電磁相容性

本產品符合 IEC 60601-1-2:2014 標準的所有適用電磁相容性(EMC)要求，適用於住宅、商用和輕工業環境。建議行動通訊裝置距離裝置至少保持 1 米遠。有關 ResMed 裝置電磁輻射和抗干擾性方面的資訊，請瀏覽 [www.resmed.com/downloads/devices](http://www.resmed.com/downloads/devices)

---

#### 分類：EN60601-1:2006/A1:2013

II 類(雙層絕緣)，BF 型，防水 IP22。

---

#### 感測器

壓力感測器：	內置於裝置的輸出口，類比錶壓類型，-5 - +45 cm H <sub>2</sub> O (-5 - +45 hPa)
流量感測器：	內置於裝置的輸入口，數位質量流量類型，-70 - +180 L/min

---

#### 最大單一故障穩定壓力

若穩定狀態壓力超過以下條件，裝置會在出現單一故障時關閉：  
30 cm H<sub>2</sub>O (30 hPa)超過 6 秒或 40 cm H<sub>2</sub>O (40 hPa)超過 1 秒

---

#### 聲壓值

根據 ISO 80601-2-70:2015 標準測得的壓力等級 (CPAP 模式)：

SlimLine：	25 dBA $\pm$ 2 dBA
標準：	25 dBA $\pm$ 2 dBA
SlimLine 或標準和加濕：	27 dBA $\pm$ 2 dBA

根據 ISO 80601-2-70:2015 標準測得的功率位準(CPAP 模式)：

SlimLine：	33 dBA $\pm$ 2 dBA
標準：	33 dBA $\pm$ 2 dBA
SlimLine 或標準和加濕：	35 dBA $\pm$ 2 dBA

聲明的雙數噪音排放值符合 ISO 4871:1996 標準。

---

#### 物理特徵 – 裝置和潮濕器

尺寸 (H x W x D) :	116 mm x 255 mm x 150 mm
空氣輸出口(符合 ISO 5336-1:2004) :	22 mm
重量 (裝置和可清潔潮濕器) :	1248 g
機殼材料 :	阻燃性工程熱塑料
水槽容量 :	至最高水位時為 380 mL
可清潔潮濕器 – 材料 :	注塑成形塑膠、不鏽鋼和矽膠密封條

---

#### 溫度

最大加熱版 :	68°C
切斷溫度 :	74°C
空氣最高溫度 :	≤ 41°C

---

#### 空氣過濾器

標準 :	材質：聚酯不織布纖維 平均計重效率：>75% 針對~7 微米粉塵
低敏感性 :	材質：丙烯和聚丙烯纖維，聚丙烯載體 平均計重效率：>98% 針對~7-8 微米粉塵； >80% 針對~0.5 微米粉塵

---

#### 在飛機上使用

ResMed 確認裝置符合美國聯邦航空總署(FAA)對航空飛行中所有階段的要求 (RTCA/DO-160, 第 21 節, M 類)。

---

#### 無線模組

技術	4G, 3G, 2G
----	------------

操作過程中，建議裝置距離身體至少 2 cm。不適用面罩、管路或配件。

---

#### 操作壓力範圍

S :	2 -25 cm H <sub>2</sub> O (2 – 25 hPa)
CPAP :	4 -20 cm H <sub>2</sub> O (4 – 20 hPa)
VAuto :	4 -25 cm H <sub>2</sub> O (4 – 25 hPa)

---

#### 補充性供氧

最大流量 :	4 L/min (所有模式)
--------	----------------

---

#### 潮濕器性能

面罩壓力	17°C環境溫度	22°C環境溫度	系統標稱輸出 AH <sup>1</sup> , BTPS <sup>2</sup>
cm H <sub>2</sub> O (hPa)	下 RH 輸出%	下 RH 輸出%	

	設定 4	設定 8	設定 4	設定 8
3	85	100	6	>10
4	85	100	6	>10
10	85	100	6	>10
20	85	90	6	>10
25	85	90	6	>10

<sup>1</sup>AH – 絕對溼度，以 mg/L 為單位

<sup>2</sup>BTPS – 體積飽和壓力

■ AirCurve 10 VAuto 包括下列項目：

- 裝置
- HumidAir 潮濕器
- 呼吸管路
- 供電裝置
- 旅行包
- SD 卡

聯絡您的醫材供應者以瞭解下列可用於本裝置的附件，包括：

- 呼吸管路 (加熱或非加熱)：ClimateLineAir, SlimLine, ClimateLineAir Oxy, Standard
- 側蓋(不使用潮濕器時使用)
- 過濾器：低敏感性過濾器、標準過濾器
- Air10 DC 直流/直流轉換器 (12V/24V)
- SD 讀卡機
- Air10 血氧機轉接頭
- Air10 USB 轉接頭
- Power Station II
- Air10 彎管

製造廠名稱：Resmed Limited

製造廠地址：1 Elizabeth Macarthur Drive BELLA VISTA, NSW, 2153 Australia

藥商名稱：台灣瑞思邁股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載



AirCurve 10 VAuto



敘述	照片
<p>潮濕器 (REF: 37299, 37300)</p>	
<p>呼吸管路</p>	
<p>供電裝置</p>	
<p>旅行包</p>	
<p>SD 卡</p>	
<p>呼吸管路 (加熱或非加熱) : ClimateLineAir, SlimLine, ClimateLineAir Oxy, Standard</p>	<p>ClimateLineAir (REF: 37296)</p>  <p>SlimLine (REF: 36810)</p>  <p>ClimateLineAir Oxy (REF: 37357)</p> 

	<p>Standard (REF: 14948)</p> 
側蓋(不使用潮濕器時使用)	
<p>過濾器： 低敏感性過濾器、標準過濾器</p>	
Air10 DC 直流/直流轉換器 (12V/24V)	
SD 讀卡機	
Air10 血氧機轉接頭	
Air10 USB 轉接頭	
Power Station II	
Air10 彎管	